



Medical Gas Maintenance Report

تقرير الصيانة الدورية لشبكة الغازات الطبية و خزانات الغاز



Oxygen - Nitrous Oxide - Air - Vacuum - Liquid Oxygen Tank - Oxygen Generator

Cairo - Egypt : 21 Hafez Al - Abhar Street
02 / 4872003 02 / 26821616

01271332581 - 01032744799 - 01009084613 - 01015013648

Giza - Egypt : El Nozha Boulak El Dakrour

MEDICAL GAS MAINTENANCE CHECK LIST

DATE:

HOSPITAL NAME:

CITY / LOCATION:

CONTRACTOR NAME:

MEDICAL AIR PLANT

كومبريسور الهواء الطبي

MANUFACTURER →

DATE OF MANUFACTURER →

	COMPRESSOR # 1	COMPRESSOR # 2	COMPRESSOR # 3
MODEL			
SERIAL NUMBER			
POWER NEW			
FLOW			
CONTROL PANEL			
OIL FILTER			
OIL LEVEL			
RUNNING HOURS			

DRYERS

المجفف

	DRYER # 1	DRYER # 2	DRYER # 3
MANUFACTURER			
SERIAL NUMBER			
DRAIN			
FLOW			
TYPE			
POWER			

TANK

التانك

MANUFACTURER	
CAPACITY	
CLEAN	
DRAIN	
SAFETY VALVE	

FILTERS

الفلاتر

CYCLONIC FILTER	
MICRONIC FILTER	
SUBMICRONIC FILTER	
DUST FILTER	
AUTOMATIC DRAIN	

REGULATORS

المنظمات

4 BAR	
7 BAR	

RECOMMENDATION

NOTES

IGAS ENG NAME:

CONT ENG NAME:

M.O.H ENG NAME:

IGAS ENG SIGNATURE:

CONT ENG SIGNATURE:

M.O.H ENG SIGNATURE:

MEDICAL GAS MAINTENANCE CHECK LIST

DATE:

CITY / LOCATION:

HOSPITAL NAME:

CONTRACTOR NAME:

MEDICAL VACUUM PLANT

وحدة التفريغ الهوائي

MANUFACTURER

DATE OF MANUFACTURER

	PUMP # 1	PUMP # 2	PUMP # 3
MODEL			
SERIAL NUMBER			
POWER			
OIL FILTERS			
OIL LEVEL			
CONTROL PANEL			
FLOW			
RUNNING HOURS			
MAX PRESSURE			
MIN PRESSURE			

TANK	التانك
MANUFACTURER	
CAPACITY	
DRAIN	

FILTERS	الفلاتر
MANUFACTURER	
CLEAN	
TYPE	

RECOMMENDATION

NOTES

IGAS ENG NAME:
CONT ENG NAME:
M.O.H ENG NAME:

IGAS ENG SIGNATURE:
CONT ENG SIGNATURE:
M.O.H ENG SIGNATURE:

MEDICAL GAS MAINTENANCE CHECK LIST

DATE:

HOSPITAL NAME:

CITY / LOCATION:

CONTRACTOR NAME:

LIQUID OXYGEN TANK

تانك الاكسجين السائل

MANUFACTURER	SERIAL NO
TANK CAPACITY	DATE OF MANUFACTURING
LEAK TEST	GAUGE
OK ☐ DEFEL ☐	OK ☐ DEFEL ☐
VAPORIZER	REFILL TIME
OK ☐ DEFEL ☐	



RECOMMENDATION
IGAS ENG NAME:
CONT ENG NAME:
M.O.H ENG NAME:

NOTES
IGAS ENG SIGNATURE:
CONT ENG SIGNATURE:
M.O.H ENG SIGNATURE:

MEDICAL GAS MAINTENANCE CHECK LIST

DATE:


HOSPITAL NAME:

CITY / LOCATION:

CONTRACTOR NAME:

OXYGEN AUTOMATIC MANIFOLD

موزع الاكسجين الطبي

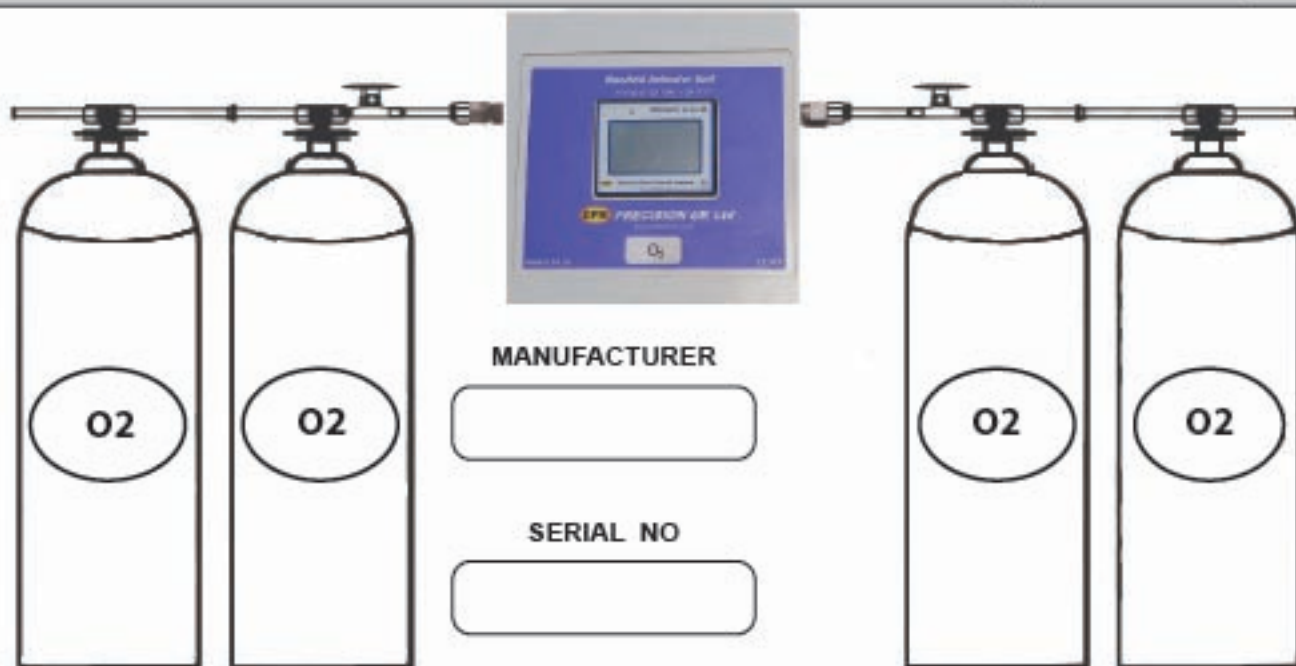

MANUFACTURER

SERIAL NO

QTY OF CYLINDERS

AUTOMATIC CHANGEOVER

OK ☐ CHANGE ☐

QTY OF CYLINDERS

TAIL PIPE

OK ☐ CHANGE ☐

GAUGE

OK ☐ CHANGE ☐

TAIL PIPE

OK ☐ CHANGE ☐

CYLINDERS CHANGE / DAY

POWER

RECOMMENDATION

NOTES

IGAS ENG NAME:

CONT ENG NAME:

M.O.H ENG NAME:

IGAS ENG SIGNATURE:

CONT ENG SIGNATURE:

M.O.H ENG SIGNATURE:

MEDICAL GAS MAINTENANCE CHECK LIST

DATE:


HOSPITAL NAME:

CITY / LOCATION:

CONTRACTOR NAME:

OXYGEN MANUAL MANIFOLD

موزع الأكسجين الإحتياطي

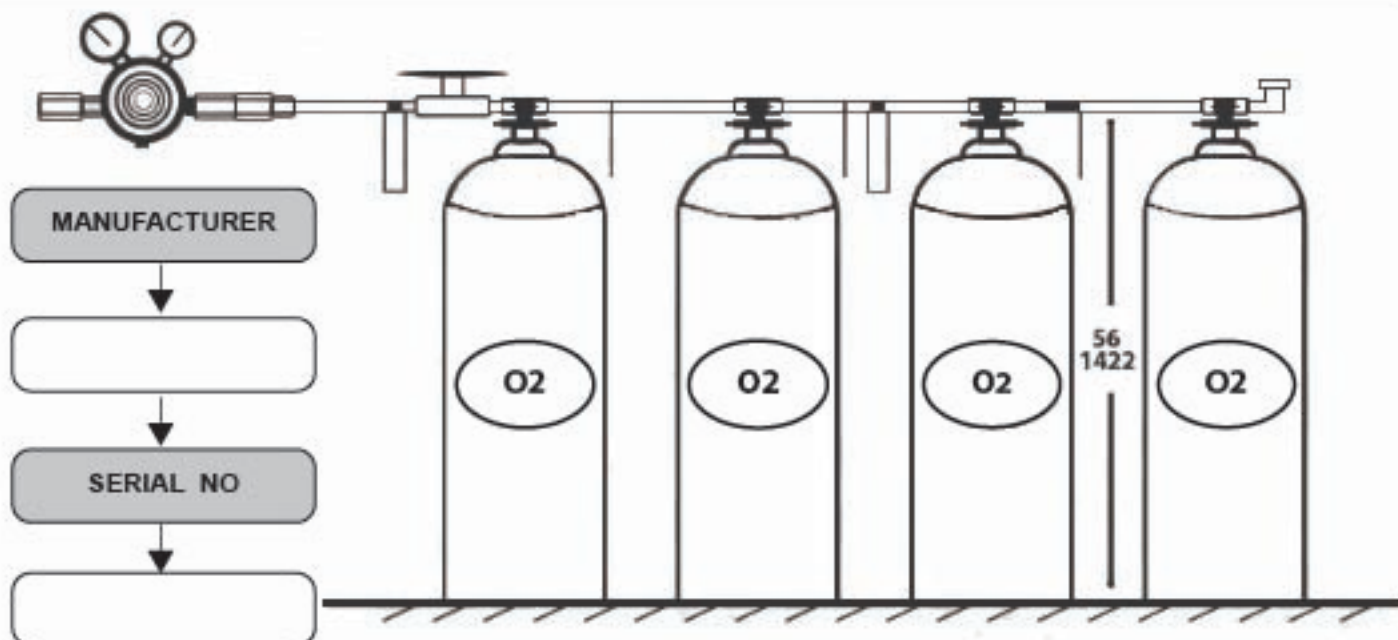

QTY OF CYLINDERS

AUTOMATIC CHANGEOVER

QTY OF CYLINDERS

OK ☐ CHANGE ☐

TAIL PIPE

GAUGE

TAIL PIPE

OK ☐ CHANGE ☐

OK ☐ CHANGE ☐

OK ☐ CHANGE ☐

POWER

RECOMMENDATION

NOTES

IGAS ENG NAME:

CONT ENG NAME:

M.O.H ENG NAME:

IGAS ENG SIGNATURE:

CONT ENG SIGNATURE:

M.O.H ENG SIGNATURE:

MEDICAL GAS MAINTENANCE CHECK LIST

DATE:


HOSPITAL NAME:

CITY / LOCATION:

CONTRACTOR NAME:

NITROUS OXIDE AUTOMATIC MANIFOLD

موزع اكسيد النيتروز الاتوماتيك

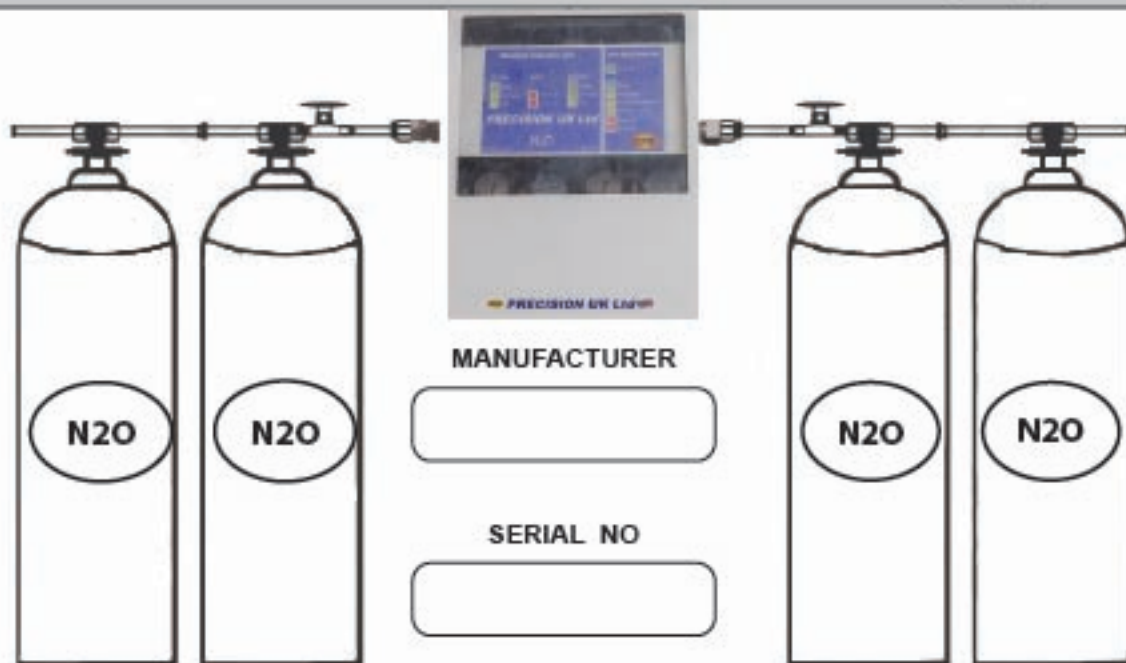

MANUFACTURER

SERIAL NO

QTY OF CYLINDERS

AUTOMATIC CHANGEOVER

OK ☐ CHANGE ☐

QTY OF CYLINDERS

TAIL PIPE

OK ☐ CHANGE ☐

GAUGE

OK ☐ CHANGE ☐

TAIL PIPE

OK ☐ CHANGE ☐

POWER

RECOMMENDATION

NOTES

IGAS ENG NAME:

CONT ENG NAME:

M.O.H ENG NAME:

IGAS ENG SIGNATURE:

CONT ENG SIGNATURE:

M.O.H ENG SIGNATURE:

MEDICAL GAS MAINTENANCE CHECK LIST

DATE:


HOSPITAL NAME:

CITY / LOCATION:

CONTRACTOR NAME:

MEDICAL AIR MANUAL MANIFOLD

موزع الهواء الطبي الاحتياطي

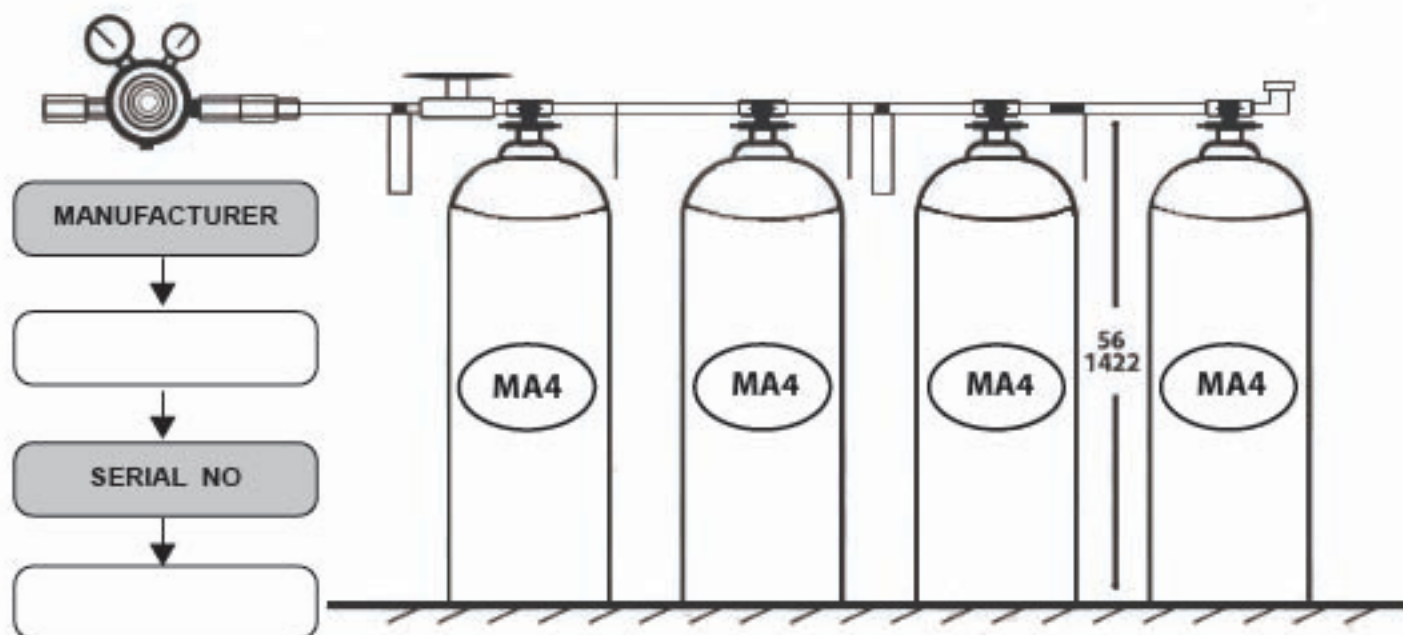

QTY OF CYLINDERS

REGULATOR CHANGEOVER

QTY OF CYLINDERS

OK ☐ CHANGE ☐

TAIL PIPE

GAUGE

TAIL PIPE

OK ☐ CHANGE ☐

OK ☐ CHANGE ☐

OK ☐ CHANGE ☐

POWER

RECOMMENDATION

NOTES

IGAS ENG NAME:

CONT ENG NAME:

M.O.H ENG NAME:

IGAS ENG SIGNATURE:

CONT ENG SIGNATURE:

M.O.H ENG SIGNATURE:

MEDICAL GAS MAINTENANCE CHECK LIST

DATE:


HOSPITAL NAME:

CITY / LOCATION:

CONTRACTOR NAME:

OXYGEN GENERATOR

مولد الأكسجين

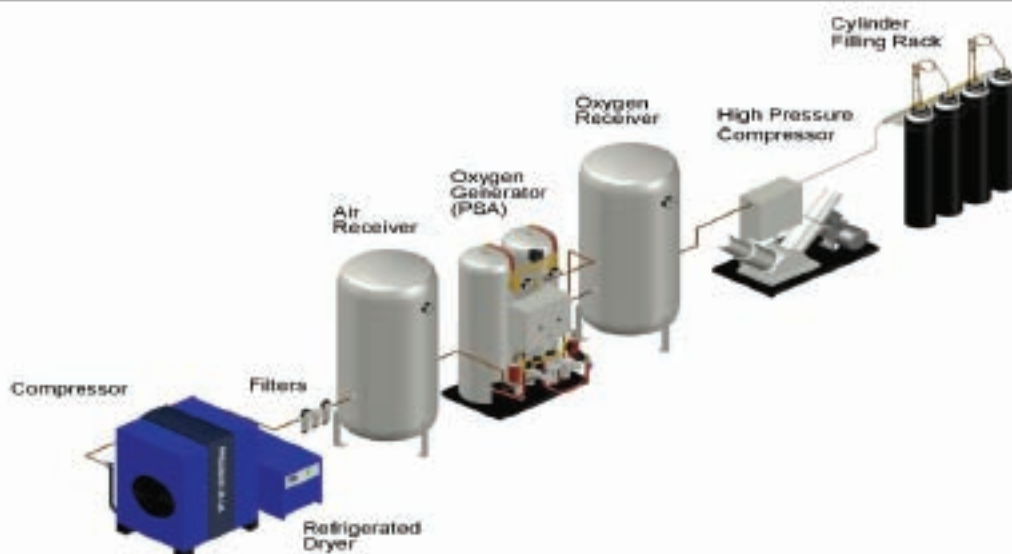

OXYGEN GENERATOR		مولد الأكسجين	
MANUFACTURER			
DATE OF INSTALLATION			
OIL LEVEL			
CONTROL PANEL			
MAX PRESSURE			
MIN PRESSURE			
NOISE			
POWER			

TANK	التانك
MANUFACTURER	
DATE OF INSTALLATION	
LAST PPM DATE	
CAPACITY	
MAX PRESSURE	
DRAIN	
SAFTY VALVE	

FILTERS & SECRATION BOTTLE	الفلاتر
MANUFACTURE	
DATE OF INSTALLATION	
LAST PPM DATE	
LAST DATE OF CHANGE	
CLEAN	
TYPE	
MAX PRESSURE	
MIN PRESSURE	

IGAS ENG NAME:	
CONT ENG NAME:	
M.O.H ENG NAME:	

IGAS ENG SIGNATURE:	
CONT ENG SIGNATURE:	
M.O.H ENG SIGNATURE:	

DATE:

HOSPITAL NAME:

CITY / LOCATION:

CONTRACTOR NAME:

IMPORTANT NOTES

1- You should have stock from oxygen cylinders included regulators , hose , adaptor to connect aneathesia machine , ventilators for Emergency case.

١- لابد من وجود اسطوانات أكسجين احتياطي في قسم العمليات والعناية المركزة والحضانات يكون بها منظم ولي به وصلة مثل وصلة المخرج التي بالحائط لتوصيله بجهاز التخدير والتنفس الصناعي فوراً في حالة عدم وجود أكسجين بالشبكة

2- You should have stock from Medical air cylinders included regulators , hose , adaptor to connect aneathesia machine , ventilators for Emergency case.

٢- لابد من وجود اسطوانات هواء طبي احتياطي في قسم العمليات والعناية المركزة والحضانات يكون بها منظم ولي به وصلة مثل وصلة المخرج التي بالحائط : لتوصيله بجهاز التخدير والتنفس الصناعي فوراً في حالة عدم وجود أكسجين بالشبكة

3- All dryers should be desicant dryers (chemical dryers) for example if you have refregirant dryers you should chang desicant

٣- كل المجففات الخاصة بضغط الهواء الطبي لابد أن تكون من النوع الكيميائي

4 - You should have breathing medical air filter.

٤- لابد من تركيب فلتر خاص بالتنفس ضمن منظومة ضغط الهواء الطبي

5-filter elements should bechanged every 12 months/8000 hours (which ever comes first) activated carbon filter element should be changed every 6months/ 1000hours (whichever

٥- الفلاتر يجب تغييرها كل ١٢ شهر أو ٨٠٠٠ ساعة أيهما أقرب ، وكذلك فلتر الكربون يتم تغييره كل ٦ شهور أو كل ١٠٠٠ ساعة

6-You should change oil every six months or each 3000hours(for vacuum,compressors)

٦- يجب تغيير الزيت لمضخة الشفط وكذلك الكمبروسر كل ٦ شهور أو ٣٠٠٠ ساعة تشغيل

7- It must be emphasized that the oxygen regulator and the suction regulator should be closed after use to avoid a leakage of oxygen gas and operate the suction pumps unnecessarily.

٧- يجب التأكيد علي غلق منظم الأكسجين ومنظم الشفط بعد الاستخدام لعدم حدوث تسريب في غاز الأكسجين وتشغيل مضخات الشفط بدون داعي

8- It is necessary to emphasize the cleanliness of the compressor room and good ventilation in order to enter fresh air or renew the air inside the room, and it is preferable to install air conditioning.

٨- يجب التأكيد علي نظافته غرفه الكمبريسور و التهويه الجيده وذلك لدخول هواء نقي او تجديد الهواء داخل الغرفه ويفضل تركيب تكييف هواء

9- The alarm system should be tested in floors and equipment rooms every 6 months.

٩- يجب اختبار نظام الانذار في الاموار وفي غرف المعدات كل ٦ اشهر



Oxygen
Nitrous Oxygen
Air
Vacuum
Liquid Oxygen Tank
Oxygen Generator

Cairo - Egypt : 21 Hafez Al - Abhar Street
02 / 4872003 02 / 26821616
01271332581 - 01032744799 - 01009084613 - 01015013648
Giza - Egypt : El Nozha Boulak El Dakrour